


ELYDA

THERMAL WELLNESS DEVICE USER MANUAL

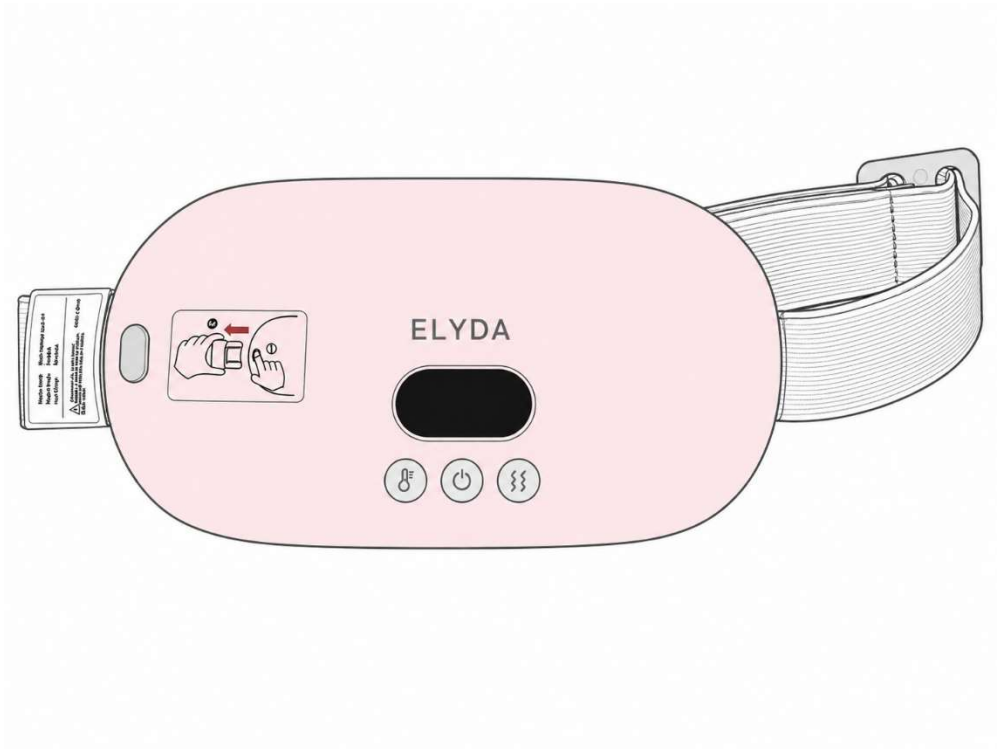

Multilanguage version

Desing by VertexBridgeGlobal. LLC in Wyoming- United States. Manufacturer in China. All rights reserve.

ELYDA – User Manual (English Version)

1. Product Overview

ELYDA Portable Heating & Vibration Belt is designed to provide effective relief from menstrual cramps and abdominal discomfort through advanced heat therapy and vibration massage.

- Ergonomic and lightweight design
 - Adjustable elastic strap
 - LED display with temperature indicator
 - Rechargeable battery
-

2. Product Diagram

Main components:

- Power Button (ON/OFF)
 - Temperature Control Button (TEMP)
 - Vibration Control Button (VIBRATION)
 - LED Display Screen
 - Charging Port
 - Adjustable Belt Strap
-

3. Key Features



Heating Technology

- Graphene-based heating system
- 3 temperature levels:
 - **Low:** 50°C (daily comfort)
 - **Medium:** 55°C (moderate relief)
 - **High:** 60°C (intense relief)



Vibration Modes

- 4 adjustable vibration levels
- Can be used:
 - With heat
 - Without heat



Battery Performance

- Long-lasting rechargeable battery
 - Designed for multiple full sessions (up to 4 cycles of 30 minutes)
-

4. How to Use

Power On / Off

- Press and hold the **ON/OFF button** to turn the device on or off.

Adjust Temperature

- Press the **TEMP button** to switch between temperature levels.

Activate Vibration

- Press the **VIBRATION button** to select intensity level.

Charging

- Use the included USB cable
 - Input: 5V
 - Fully charge before first use
-

5. Safety Instructions

- Do not use while sleeping
 - Do not use for prolonged periods in the same position
 - Stop use if discomfort or skin irritation occurs
 - Not all people have the same sensitivity to heat on their skin. If it feels too hot, use the device over a cotton shirt.
 - Keep away from water and corrosive substances
 - Do not expose to high heat sources
-

6. Contraindications

Do NOT use if:

- You are pregnant
 - You have severe heart conditions
 - You have skin injuries or sensitivity issues in the area
 - You suffer from serious medical conditions without consulting a doctor
-

7. Maintenance & Care

- Clean with a soft, dry cloth
 - Do not immerse in water
 - Store in a cool, dry place
 - Avoid folding the heating area excessively
-

8. Technical Specifications

- Product Name: ELYDA Heating Belt
 - Size: 165 × 85 × 25 mm
 - Material: ABS + Soft Fabric
 - Temperature Levels: 50°C / 55°C / 60°C
 - Charging Voltage: 5V
 - Application Area: Abdomen / Waist
-

9. After-Sales Service

If you experience any issues:

- Contact customer support with purchase details
 - Warranty: up to 6 months
 - Provide:
 - Name
 - Order information
 - Issue description
 - Contact info (Email)
-

10. Tips for Best Results

- Use during the first signs of discomfort

- Combine heat + vibration for stronger relief
- Use in a relaxed position

ELYDA – Manual de Usuario (Versión en Español)

1. Descripción del Producto

El cinturón portátil de calor y vibración ELYDA está diseñado para proporcionar un alivio efectivo de los dolores menstruales y molestias abdominales mediante tecnología avanzada de calor y masaje por vibración.

- Diseño ergonómico y liviano
 - Correa elástica ajustable
 - Pantalla LED con indicador de temperatura
 - Batería recargable
-

2. Diagrama del Producto

Componentes principales:

- Botón de encendido (ON/OFF)
 - Botón de control de temperatura (TEMP)
 - Botón de control de vibración (VIBRATION)
 - Pantalla OLED
 - Puerto de carga
 - Correa ajustable
-

3. Características Principales



Tecnología de Calor

- Sistema de calentamiento basado en grafeno
- 3 niveles de temperatura:
 - o Bajo: 50°C (confort diario)

- o Medio: 55°C (alivio moderado)
- o Alto: 60°C (alivio intenso)



Modos de Vibración

- 4 niveles de vibración ajustables
- Puede utilizarse:
 - o Con calor
 - o Sin calor



Rendimiento de la Batería

- Batería recargable de larga duración
 - Diseñada para múltiples sesiones completas (hasta 4 ciclos de 30 minutos)
-

4. Modo de Uso

Encendido / Apagado

- Mantener presionado el botón ON/OFF para encender o apagar el dispositivo.

Ajustar Temperatura

- Presionar el botón TEMP para cambiar entre los niveles de temperatura.

Activar Vibración

- Presionar el botón VIBRATION para seleccionar el nivel de intensidad.

Carga

- Utilizar el cable USB incluido
 - Entrada: 5V
 - Cargar completamente antes del primer uso
-

5. Instrucciones de Seguridad

- No usar mientras se duerme
 - No utilizar por períodos prolongados en la misma posición
 - Suspender el uso si se presenta incomodidad o irritación en la piel
 - No todas las personas tienen la misma sensibilidad al calor en la piel. En caso de sentirlo demasiado caliente, usar el equipo sobre una remera de algodón
 - Mantener alejado del agua y sustancias corrosivas
 - No exponer a fuentes de calor elevadas
-

6. Contraindicaciones

NO usar si:

- Está embarazada
 - Tiene problemas cardíacos severos
 - Tiene lesiones en la piel o sensibilidad en la zona
 - Padece condiciones médicas graves sin consultar previamente con un médico
-

7. Mantenimiento y Cuidado

- Limpiar con un paño suave y seco
 - No sumergir en agua
 - Guardar en un lugar fresco y seco
 - Evitar doblar excesivamente la zona de calentamiento
-

8. Especificaciones Técnicas

- Nombre del producto: Cinturón térmico ELYDA
 - Tamaño: 165 × 85 × 25 mm
 - Material: ABS + tela suave
 - Niveles de temperatura: 50°C / 55°C / 60°C
 - Voltaje de carga: 5V
 - Área de aplicación: Abdomen / cintura
-

9. Servicio Postventa

Si experimenta algún problema:

- Contactar al servicio de atención al cliente con los datos de compra
- Garantía: hasta 12 meses (recomendado incluir)
- Proporcionar:
 - o Nombre
 - o Información del pedido
 - o Descripción del problema

°Información de contacto (Email)

10. Consejos para Mejores Resultados

- Usar ante los primeros signos de molestia
- Combinar calor + vibración para un mayor alivio
- Utilizar en una posición relajada

ELYDA – Manuel d’Utilisation (Version Française)

1. Aperçu du Produit

La ceinture portable chauffante et vibrante ELYDA est conçue pour offrir un soulagement efficace des douleurs menstruelles et des inconforts abdominaux grâce à une technologie avancée de chaleur et de massage par vibration.

- Design ergonomique et léger
 - Sangle élastique ajustable
 - Écran LED avec indicateur de température
 - Batterie rechargeable
-

2. Schéma du Produit

Composants principaux :

- Bouton d’alimentation (ON/OFF)
 - Bouton de contrôle de la température (TEMP)
 - Bouton de contrôle des vibrations (VIBRATION)
 - Écran LED
 - Port de charge
 - Sangle ajustable
-

3. Caractéristiques Principales



Technologie de Chauffage

- Système de chauffage à base de graphène
- 3 niveaux de température :
 - o Bas : 50°C (confort quotidien)
 - o Moyen : 55°C (soulagement modéré)
 - o Élevé : 60°C (soulagement intense)



Modes de Vibration

- 4 niveaux de vibration réglables
- Peut être utilisé :
 - o Avec chaleur
 - o Sans chaleur



Performance de la Batterie

- Batterie rechargeable longue durée
- Conçue pour plusieurs sessions complètes (jusqu'à 4 cycles de 30 minutes)

4. Mode d'Utilisation

Allumer / Éteindre

- Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.

Régler la Température

- Appuyez sur le bouton TEMP pour changer de niveau de température.

Activer les Vibrations

- Appuyez sur le bouton VIBRATION pour sélectionner le niveau d'intensité.

Chargement

- Utilisez le câble USB inclus
- Entrée : 5V
- Charger complètement avant la première utilisation

5. Consignes de Sécurité

- Ne pas utiliser pendant le sommeil
- Ne pas utiliser pendant de longues périodes au même endroit
- Arrêter l'utilisation en cas d'inconfort ou d'irritation de la peau
- Toutes les personnes n'ont pas la même sensibilité à la chaleur. Si cela semble trop chaud, utilisez l'appareil par-dessus un vêtement en coton

- Tenir à l'écart de l'eau et des substances corrosives
 - Ne pas exposer à des sources de chaleur élevées
-

6. Contre-indications

NE PAS utiliser si :

- Vous êtes enceinte
 - Vous avez des problèmes cardiaques graves
 - Vous avez des lésions cutanées ou une sensibilité dans la zone
 - Vous souffrez de conditions médicales graves sans consulter un médecin
-

7. Entretien et Maintenance

- Nettoyer avec un chiffon doux et sec
 - Ne pas immerger dans l'eau
 - Conserver dans un endroit frais et sec
 - Éviter de plier excessivement la zone chauffante
-

8. Spécifications Techniques

- Nom du produit : Ceinture chauffante ELYDA
 - Dimensions : 165 × 85 × 25 mm
 - Matériau : ABS + tissu doux
 - Niveaux de température : 50°C / 55°C / 60°C
 - Tension de charge : 5V
 - Zone d'application : Abdomen / taille
-

9. Service Après-Vente

En cas de problème :

- Contacter le service client avec les détails de l'achat
- Garantie : jusqu'à 12 mois (recommandé d'inclure)
- Fournir :
 - o Nom

- o Informations de commande
- o Description du problème

° E-Mail de Contact

10. Conseils pour de Meilleurs Résultats

- Utiliser dès les premiers signes d'inconfort
- Combiner chaleur + vibration pour un soulagement optimal
- Utiliser dans une position détendue

ELYDA – Manuale d'Uso (Versione Italiana)

1. Panoramica del Prodotto

La cintura portatile riscaldante e vibrante ELYDA è progettata per offrire un sollievo efficace dai dolori mestruali e dai fastidi addominali grazie a una tecnologia avanzata di calore e massaggio a vibrazione.

- Design ergonomico e leggero
 - Cintura elastica regolabile
 - Display LED con indicatore di temperatura
 - Batteria ricaricabile
-

2. Schema del Prodotto

Componenti principali:

- Pulsante di accensione (ON/OFF)
- Pulsante di controllo della temperatura (TEMP)
- Pulsante di controllo della vibrazione (VIBRATION)
- Display LED
- Porta di ricarica
- Cintura regolabile

3. Caratteristiche Principali



Tecnologia di Riscaldamento

- Sistema di riscaldamento a base di grafene
- 3 livelli di temperatura:
 - o Basso: 50°C (comfort quotidiano)
 - o Medio: 55°C (sollevio moderato)
 - o Alto: 60°C (sollevio intenso)



Modalità di Vibrazione

- 4 livelli di vibrazione regolabili
- Può essere utilizzata:
 - o Con calore
 - o Senza calore



Prestazioni della Batteria

- Batteria ricaricabile a lunga durata
- Progettata per sessioni multiple complete (fino a 4 cicli da 30 minuti)

4. Modalità d'Uso

Accensione / Spegnimento

- Tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il dispositivo.

Regolazione della Temperatura

- Premere il pulsante TEMP per cambiare livello di temperatura.

Attivazione della Vibrazione

- Premere il pulsante VIBRATION per selezionare il livello di intensità.

Ricarica

- Utilizzare il cavo USB incluso
- Ingresso: 5V
- Caricare completamente prima del primo utilizzo

5. Istruzioni di Sicurezza ⚠

- Non utilizzare durante il sonno
 - Non utilizzare per periodi prolungati nella stessa posizione
 - Interrompere l'uso in caso di fastidio o irritazione della pelle
 - Non tutte le persone hanno la stessa sensibilità al calore. Se risulta troppo caldo, utilizzare il dispositivo sopra un indumento in cotone
 - Tenere lontano da acqua e sostanze corrosive
 - Non esporre a fonti di calore elevate
-

6. Controindicazioni

NON utilizzare se:

- Si è in gravidanza
 - Si soffre di gravi problemi cardiaci
 - Si hanno lesioni cutanee o sensibilità nella zona
 - Si soffre di condizioni mediche gravi senza aver consultato un medico
-

7. Manutenzione e Cura

- Pulire con un panno morbido e asciutto
 - Non immergere in acqua
 - Conservare in un luogo fresco e asciutto
 - Evitare di piegare eccessivamente la zona riscaldante
-

8. Specifiche Tecniche

- Nome del prodotto: Cintura riscaldante ELYDA
 - Dimensioni: 165 × 85 × 25 mm
 - Materiale: ABS + tessuto morbido
 - Livelli di temperatura: 50°C / 55°C / 60°C
 - Tensione di ricarica: 5V
 - Area di applicazione: Addome / vita
-

9. Assistenza Post-Vendita

In caso di problemi:

- Contattare il servizio clienti con i dettagli dell'acquisto
 - Garanzia: fino a 12 mesi (consigliato includere)
 - Fornire:
 - o Nome
 - o Informazioni dell'ordine
 - o Descrizione del problema
 - E-mail di contatto
-

10. Consigli per Migliori Risultati

- Utilizzare ai primi segnali di fastidio
- Combinare calore + vibrazione per un sollievo maggiore
- Utilizzare in posizione rilassata

ELYDA – Benutzerhandbuch (Deutsche Version)

1. Produktübersicht

Der tragbare Heiz- und Vibrationsgürtel ELYDA wurde entwickelt, um durch fortschrittliche Wärmetherapie und Vibrationsmassage eine effektive Linderung von Menstruationsschmerzen und Bauchbeschwerden zu bieten.

- Ergonomisches und leichtes Design
 - Verstellbarer elastischer Gurt
 - LED-Display mit Temperaturanzeige
 - Wiederaufladbarer Akku
-

2. Produktdiagramm

Hauptkomponenten:

- Ein-/Aus-Taste (ON/OFF)
 - Temperatursteuerungstaste (TEMP)
 - Vibrationstaste (VIBRATION)
 - LED-Display
 - Ladeanschluss
 - Verstellbarer Gurt
-

3. Hauptmerkmale



Heiztechnologie

- Heizsystem auf Graphenbasis
- 3 Temperaturstufen:
 - o Niedrig: 50°C (tägliches Komfort)
 - o Mittel: 55°C (mäßige Linderung)
 - o Hoch: 60°C (intensive Linderung)



Vibrationsmodi

- 4 einstellbare Vibrationsstufen
- Kann verwendet werden:
 - o Mit Wärme
 - o Ohne Wärme



Akkuleistung

- Langlebiger, wiederaufladbarer Akku
 - Entwickelt für mehrere vollständige Sitzungen (bis zu 4 Zyklen à 30 Minuten)
-

4. Anwendung

Ein-/Ausschalten

- Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Temperatur einstellen

- Drücken Sie die TEMP-Taste, um zwischen den Temperaturstufen zu wechseln.

Vibration aktivieren

- Drücken Sie die VIBRATION-Taste, um die Intensitätsstufe auszuwählen.

Aufladen

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel
 - Eingang: 5V
 - Vor der ersten Nutzung vollständig aufladen
-

5. Sicherheitshinweise

- Nicht während des Schlafens verwenden
 - Nicht über längere Zeit in derselben Position verwenden
 - Bei Unwohlsein oder Hautreizungen die Anwendung sofort beenden
 - Nicht alle Menschen haben die gleiche Empfindlichkeit gegenüber Wärme. Wenn es sich zu heiß anfühlt, verwenden Sie das Gerät über einem Baumwollkleidungsstück
 - Von Wasser und korrosiven Substanzen fernhalten
 - Nicht hohen Wärmequellen aussetzen
-

6. Gegenanzeigen

NICHT verwenden, wenn:

- Sie schwanger sind
 - Sie an schweren Herzerkrankungen leiden
 - Sie Hautverletzungen oder Empfindlichkeit im Anwendungsbereich haben
 - Sie an schweren Erkrankungen leiden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren
-

7. Pflege und Wartung

- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
 - Nicht in Wasser eintauchen
 - An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren
 - Den Heizbereich nicht übermäßig falten
-

8. Technische Spezifikationen

- Produktname: ELYDA Heizgürtel
- Größe: 165 × 85 × 25 mm
- Material: ABS + weiches Gewebe
- Temperaturstufen: 50°C / 55°C / 60°C

- Ladespannung: 5V
 - Anwendungsbereich: Bauch / Taille
-

9. Kundendienst

Bei Problemen:

- Kontaktieren Sie den Kundendienst mit Ihren Kaufdetails
 - Garantie: bis zu 12 Monate (empfohlen einzuschließen)
 - Bereitstellen:
 - o Name
 - o Bestellinformationen
 - o Problembeschreibung
 - E-Mail-Kontakt
-

10. Tipps für beste Ergebnisse

- Bei den ersten Anzeichen von Beschwerden verwenden
- Wärme + Vibration für stärkere Linderung kombinieren
- In entspannter Position verwenden

ELYDA – Manual do Usuário (Versão em Português)

1. Visão Geral do Produto

A cinta portátil de aquecimento e vibração ELYDA foi desenvolvida para proporcionar alívio eficaz das cólicas menstruais e desconfortos abdominais por meio de tecnologia avançada de calor e massagem por vibração.

- Design ergonômico e leve
- Cinta elástica ajustável

- Display LED com indicador de temperatura
 - Bateria recarregável
-

2. Diagrama do Produto

Componentes principais:

- Botão de energia (ON/OFF)
 - Botão de controle de temperatura (TEMP)
 - Botão de controle de vibração (VIBRATION)
 - Tela LED
 - Porta de carregamento
 - Cinta ajustável
-

3. Principais Características



Tecnologia de Aquecimento

- Sistema de aquecimento baseado em grafeno
- 3 níveis de temperatura:
 - o Baixo: 50°C (conforto diário)
 - o Médio: 55°C (alívio moderado)
 - o Alto: 60°C (alívio intenso)



Modos de Vibração

- 4 níveis de vibração ajustáveis
- Pode ser utilizado:
 - o Com calor
 - o Sem calor



Desempenho da Bateria

- Bateria recarregável de longa duração
 - Projetada para múltiplas sessões completas (até 4 ciclos de 30 minutos)
-

4. Como Usar

Ligar / Desligar

- Pressione e segure o botão ON/OFF para ligar ou desligar o dispositivo.

Ajustar Temperatura

- Pressione o botão TEMP para alternar entre os níveis de temperatura.

Ativar Vibração

- Pressione o botão VIBRATION para selecionar o nível de intensidade.

Carregamento

- Utilize o cabo USB incluído
 - Entrada: 5V
 - Carregar completamente antes do primeiro uso
-

5. Instruções de Segurança

- Não utilizar durante o sono
 - Não utilizar por períodos prolongados na mesma posição
 - Interromper o uso em caso de desconforto ou irritação na pele
 - Nem todas as pessoas possuem a mesma sensibilidade ao calor na pele. Caso esteja muito quente, utilize o dispositivo sobre uma peça de roupa de algodão
 - Manter afastado da água e de substâncias corrosivas
 - Não expor a fontes de calor elevadas
-

6. Contraindicações

NÃO utilizar se:

- Estiver grávida
 - Tiver problemas cardíacos graves
 - Tiver lesões ou sensibilidade na pele na área de uso
 - Sofrer de condições médicas graves sem consultar um médico
-

7. Manutenção e Cuidados

- Limpar com um pano macio e seco
 - Não mergulhar em água
 - Armazenar em local fresco e seco
 - Evitar dobrar excessivamente a área de aquecimento
-

8. Especificações Técnicas

- Nome do produto: Cinta térmica ELYDA
 - Tamanho: 165 × 85 × 25 mm
 - Material: ABS + tecido macio
 - Níveis de temperatura: 50°C / 55°C / 60°C
 - Tensão de carregamento: 5V
 - Área de aplicação: Abdômen / cintura
-

9. Pós-venda

Se houver algum problema:

- Entre em contato com o suporte ao cliente com os dados da compra
 - Garantia: até 12 meses (recomendado incluir)
 - Fornecer:
 - o Nome
 - o Informações do pedido
 - o Descrição do problema
 - E-mail de contato
-

10. Dicas para Melhores Resultados

- Utilizar nos primeiros sinais de desconforto
- Combinar calor + vibração para maior alívio
- Utilizar em posição relaxada